


De werking en onderhoud van een hoortoestel

- M = microfoon; bij aanzetten staat het hoortoestel op M.
T = telefoon / ringleiding, waarbij geluid uit de omgeving niet wordt versterkt. Vraag de audicien of de T-stand geactiveerd is.
- Het hoortoestel rechts kun je herkennen aan een rood stipje, links is dat blauw.
- Aanzetten: batterijlade sluiten, tot “klik”
Uitzetten: batterijlade openen.
- Sommige hoortoestellen hebben een volumeknopje.
- Batterij vervangen: sticker verwijderen, met + naar boven (=platte kant) in lade leggen.
- Schoonmaken:
Oorstukje schoonmaken met vochtig doekje.
Geluids- en ventilatiekanaal met reinigingspennetje schoonmaken.
HT met eartip: slangetje van het hoortoestel loshalen door linksom te draaien; slangetje reinigen met schoonmaakspriet; eartip schoonmaken met vochtig doekje.
Laat het slangetje vervangen zodra het niet meer soepel is.

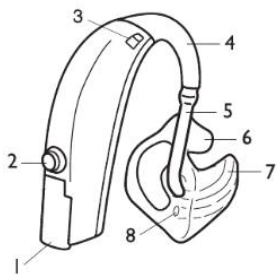

- 1=batterijlade (aan/uit)
2=programma-toets
3=microfoon
4=toonbochtje
5=slangetje
6=oorstukje
7=geluidskanaal
8=ventilatiekanaal

Aanschaf en gebruik

Praktische tips

- Kies bij een eerste hoortoestel voor één met een eenvoudige bediening.
- Kies bij vervanging van een hoortoestel voor een zelfde bedieningsvorm.
- Om de aanpassing en het dragen van een hoortoestel succesvol te laten verlopen, is het van belang dit te begeleiden.
Het is raadzaam om de slechthorende met dementie langzaam te laten wennen aan het hoortoestel: eerst alleen gebruiken in communicatieve situaties, als er echt iets te luisteren en te verstaan is.
- Als hij ander gedrag laat zien, bijvoorbeeld schrikken of agressief zijn: vraag of de audicien het hoortoestel anders kan instellen.
- De slechthorende met dementie kan vaak zelf niet aangeven of het hoortoestel goed werkt; controleer, voordat je het in het oor doet, of hij het doet, en of het slangetje nog soepel is.
- Het is belangrijk dat het oorstukje goed in de gehoorgang en in de oorschelp wordt geplaatst, om drukplekken te voorkomen (een drukplekje kan het begin van decubitus zijn).
- Help het hoortoestel schoon te maken, en help met de bediening.
- Door het gebruik van hoortoestellen is er kans op het ontstaan van meer oorsmeer. Laat daarom regelmatig de gehoorgangen controleren en laat eventueel ontstaan oorsmeer verwijderen.
- Hebt u problemen met het hoortoestel, neem dan contact op met de audicien.
- Bij telefoneren met een vaste telefoon, houd je het hoortoestel iets boven het oor, tegen het hoortoestel.
- Ook mét hoortoestel blijft verstaan moeizaam

Prettige communicatie

Tips voor prettige communicatie met een slechthorende met dementie

- Voer een gesprek in een rustige en lichte omgeving, waar geen afleidende bewegingen of storende geluiden zijn. Probeer zó te gaan zitten, dat op jouw gezicht het licht valt.
- Maak contact voordat je begint te praten; dan kan hij de aandacht op jou richten.
- Zorg dat je gezicht, en met name je mond goed zichtbaar is, dan kan hij zien dat je praat, en mogelijk gebruik maken van spraakafzien.
- Houd oogcontact gedurende het gesprek. Dan kun jij aan zijn gezicht zien of hij nog zijn aandacht bij jou heeft, en of hij het begrijpt, wat jij zegt.
- Begin te zeggen waarover je wilt praten, dan is het gesprek makkelijker te volgen.
- Ga op gelijke hoogte bij hem zitten, en neem de tijd voor het gesprek. Doe ondertussen geen andere dingen.
- Praat rustig, om de beurt, niet luider dan normaal. Luider spreken kan bozig klinken.
- Mensen met dementie kunnen vreemden beter verstaan, wanneer zij Nederlands spreken, en geen dialect.
- Ondersteun de gesproken taal met passende mimiek en eventueel gebaren.
- Gebruik zoveel mogelijk concrete taal, en spreek in korte zinnen. Vermijd complexe taal.
- Bij verkeerd verstaan: herhaal wat je hebt gezegd, eventueel met andere woorden.
- Hebt u problemen met communiceren met behulp van het hoortoestel, neem dan contact op de logopedist.

Als er problemen zijn

Als het hoortoestel piept /fluit, wanneer hij in het oor zit.

Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer:

- of het slangetje of oorstukje verstopt zit;
- of er teveel oorsmeer of een prop in de gehoorgang zit;
- of het slangetje hard of kapot is, of losgaat van het oorstukje of de toonbocht;
- of de toonbocht kapot is;
- of er haren in de gehoorgang zitten die tegen de geluidsopening van het oorstukje komen;
- of het oorstukje goed in de gehoorgang en oorschelp is geplaatst;
- of het oorstukje nog wel passend is; door groei van de gehoorgang moet het oorstukje na een aantal jaren opnieuw aangemeten worden.

De slechthorende hoort iets anders dan wij horen.

Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer:

- of het hoortoestel op de goede stand staat. Als hij op de T-stand staat kunnen geluiden van een magnetisch veld worden opvangen, bijvoorbeeld muziek uit een andere ruimte waar een ringleiding aan staat;
- of het toestel op M staat: sluit hem in beide handen: hij zal gaan rondzingen/ piepen;
- of het hoortoestel op T staat: houd hem op een horloge met een kwarts uurwerk: hoor je het tikken versterkt, dan staat hij op T.

Het hoortoestel versterkt spraakgeluiden niet.

Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer:

- of het oorstukje verstopt zit met oorsmeer;
- of de batterij goed is / goed in de lade zit;
- of het contact met de batterij schoon is;
- of het hoortoestel op de M-stand staat;
- of de batterijlade goed gesloten is.

Het hoortoestel versterkt onvoldoende.

Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer:

- of de aan/uit-schakelaar schoon is (batterijlade);
- of de batterij nog voldoende power heeft;
- of het contactpunt met de batterij schoon is;
- of het slangetje nog zacht is;
- of er oorsmeer in het oorstukje zit;
- of er oorsmeer of een afsluitende prop in het oor zit;
- of de gehoorfunctie achteruit is gegaan.

Het hoortoestel is nat geworden.

Bijvoorbeeld onder de douche, in het (zwem-)bad, in de wasmachine of in het gebittenbakje:

- haal het slangetje los van het toonbochtje;
- laat evt. water uit het toonbochtje lopen;
- droog het toestel aan de buitenkant af;
- zet de batterijlade open;
- laat het toestel rustig drogen, niet in de zon, niet in de magnetron, niet op de c.v.

De slechthorende haalt het hoortoestel uit het oor.

Ga na wat de oorzaak kan zijn. Controleer:

- of er een rood plekje in de oorschelp en/of in de gehoorgang zit;
- of het oorstukje nog goed passend is;
- of het hoortoestel het doet;
- of er teveel hinderlijk omgevingslawaai is.

Literatuurlijst

Afbeelding verkregen van: www.doof.nl ; www.oticon.nl

Watermerkafbeelding verkregen van:

www.erasmusmc.nl

Deze flyer is tot stand gekomen met medewerking van de leden van de subwerkgroep Gehoor van de Landelijke Werkgroep Logopedie & Dementie. November 2017.

Het gebruik van digitale hoortoestellen bij mensen met dementie

Een folder voor slechthorenden met dementie en hun mantelzorgers.



Deze folder is bedoeld om praktische informatie en tips te geven.

Door **aandacht te besteden aan gehoorverlies** kunnen communicatieve vaardigheden zoals het begrijpen van taal en het voeren van gesprekken langer behouden blijven.

Met het dragen van een hoortoestel kan gesproken informatie beter ontvangen en verwerkt worden.

Landelijke werkgroep
Logopedie & Dementie

